

Fedezze fel a 6 opciót, melyek lefedik valamennyi klinikai esetét

Anterior: igazítsa a rétegezést páciense korához

A **Fehérített** vagy **Gyermek** helyreállítások esetében a zománc legyen fehér és opak, és a dentin is a fehér felé közeledjen. Ebben az esetben a Light Dentin és a Light Enamel kombinációja látható.

LD LE



Fiatal páciensek esetében az opak és fehér zománc, valamint a kissé kromatikusabb dentin kombinációja javasolt. Ebben az esetben a Medium Dentin és a Light Enamel kombinációja látható.

MD LE



Felnőtt fogaknál a zománc áttetszőbbé válik kis elszíneződésekkel, míg a dentin közepesen kromatikus marad. Optimális esetben a Medium Dentint fedjük Dark Enamellel.

MD DE



Idős fogak esetén a zománcnál erős transzluencia és kromatikuság igényelt, a dentin pedig sötétebb és áttetszőbb kell, hogy legyen. A tökéletes kombináció a Dark Dentin befedése Dark Enamellel.

DD DE



Poszterior: természetes kétréteges vagy szimpla egyszínes helyreállítás

Poszterior / Mono

Sok esetben már egyetlen szín, az Universal használata is elegendő a megfelelő poszterior esztétika eléréséhez.

U



Poszterior / Duo

Általában a poszterior régióban a dentin sötétebbnek tűnik, míg a zománcnak fehéres árnyalata van. A Dark Dentint fedjük le Light Enamellel.

DD LE



Essentia – az esztétikus helyreállítás két réteggel, csökkentett színekészlettel



Utántöltő – fecskendő

- 2 ml-es fecskendő visszazárható kupakkal: LD; MD; DD; LE; DE; U; OM
- 2 ml-es fecskendő 20 adagolócsőrrel: ML
- 2.4 ml-es fecskendő: RBM; BM; WM

Utántöltő – unitip

- 15 unitip (0.16 ml): LD; MD; DD; LE; DE; U

Starter készlet – fecskendő

- 7 fecskendő, minden színből 1: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML
- 20 adagolócsőr
- Kiegészítők

Starter készlet – unitip

- 30 unitip (színenként 5 unitip: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 fecskendő ML; 20 adagolócsőr
- Kiegészítők

Modifier készlet

- 4 fecskendő: RBM, BM, WM, OM

Essentia színek:



Essentia modifikálók:



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Fazekas u. 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
Fax. +36.1.224.04.01
hungary@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

z O LF HU 8 76 06/15

Az esztétikum,
mely visszatér az alapokhoz



Essentia™
a GC-től

Nyisson ajtót az
egyszerűsítésre

Kövesse a megérzéseit

GC

Lehetne még ennél is egyszerűbb?

Az esztétikus helyreállításról gyakran a bonyolult rétegzési technikákra asszociálunk. Sok éves fejlesztés után, **vezető esztétikai fogorvosok tapasztalatai alapján** a GC most a helyreállító fogászatban paradigmaváltó, **innovatív és merész színekonceptiót** mutat be.

Az Essentia a **kompozit rétegzés tiszta lényegét** képviseli. Mostantól mindössze hét fecskendővel minden helyreállításra tökéletes esztétikát nyújtunk Önnek.

Szabaduljon meg a konvencióktól a GC Essentiájával



Prof. Marleen Peumans (Belgium)

A hagyományos színrendszerek különböző színárnyalatokra épülnek, amik A, B, C és D néven ismertek. Ugyanakkor tudjuk, hogy **a zománcnak és a dentinnek más a karakterisztikája**, és mindkettő hozzájárul a fog végső színének érzékeléséhez. Azáltal, ha elszakadunk a hagyományos monokromatikus színektől, és **az enamel és a dentin karakterisztikájának reprodukálására fókuszálunk**, mindössze két egyszerű réteggel juthatunk egy sokkal természetesebb eredményhez.

Ezt kapja Ön az Essentiától

A **három dentinszín** eltérő telítettségű és opacitású, akárcsak az életkor növekedésével a természetes dentin. Ezek **felelősek a rétegzett helyreállítások színének intenzitásáért**.

A dentinnekkel párosítva a **két zománcszín biztosítja a fogak translucenciáját**, és életre kelti őket.



Világos Dentin



Közepes Dentin



Sötét Dentin



Világos Zománc



Sötét Zománc



Universal



Masking Liner



Az Essentia minden színe a kezelési jellemzők és az optikai tulajdonságok egyedi keveréke

Dentinek: biztosítják a színadaptációt minden helyzetben

A mikrohibrid kompozíciónak köszönhetően a dentin színek biztosítják a **fény megfelelő visszatükröződését és szóródását** a tökéletes illeszkedés eléréséért.

Lágy viszkozitásának köszönhetően könnyen kezelhető, egy ecsettel vagy egy spatulával is használható.

Zománcok: fényt adnak a helyreállításoknak

Erősebb transzlucenciájának köszönhetően a zománcszínek természetes hatást kölcsönöznek a helyreállításoknak.

A pár lépésben elvégezhető, könnyű polírozhatóság és a fény **kiváló, hosszú távú megtartása** le fogja nyugtatni.

A végső, külső keménység elérésének érdekében **kissé sűrűbb** a konzisztenciájuk.

Universal: egyetlen szín minden kisméretű és poszterior helyreállításához

Ez az egyetlen szín **tökéletes illeszkedést** mutat minden olyan esetben, ahol nem szükséges a rétegzés, mint például a kisméretű és poszterior kavítások.

A poszterior régióba történő könnyebb applikáció érdekében **kissé tömöríthetőbb**.

Masking Liner: az elszíneződések eltüntetése

A Masking Linert azért fejlesztettük ki, hogy a mély kavításokban gyakran látható elszíneződések és foltok okozta tökéletlenségeket elfedje egy **vékony opak réteggel**.

Fecskendezhető, hogy még a kavítások legmélyebb részeit is elérje.


Az Essentia mindössze két szín használatával lehetővé teszi az élethű anterior helyreállítások létrehozását!



Dr. Javier Tapia Guadix (Spanyolország) és Prof. Marleen Peumans (Belgium) klinikai esete

Ebben a nagy kihívást jelentő esetben **mindössze két szín** (Medium Dentin és Light Enamel) elegendő volt a **szomszédos fogak természetes megjelenésének lemásolásához**, és a fiatal páciens ragyogó mosolyához.

Az Essentia extra erőfeszítések nélkül teszi természetesebbé a poszterior helyreállításokat

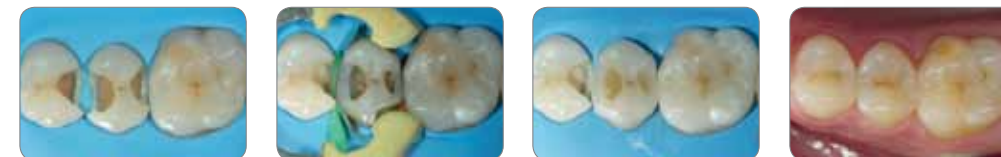


Dr. Javier Tapia Guadix (Spanyolország) klinikai esete

A legtöbb poszterior esetben elég mindössze a **nagyon kromatikus Dark Dentint** és a **Light Enamelt**, használni, melyek együtt **ilyen természetesnek** ható poszterior felépítést eredményeznek.

Az Essentia még a bonyolultabb eseteket is új szintre emeli

A négy modifikálónak köszönhetően a **helyreállítási lehetőségei még jobban kiszélesednek**. A **helyreállítások gyors karakterizálására** megalkotva: az Opalescent Modifier (bal) segítségével halo-hatást hozhat létre az incizális széleken, vagy repedéseket a poszterior területeken a Red Brown Modifier (jobb) segítségével.

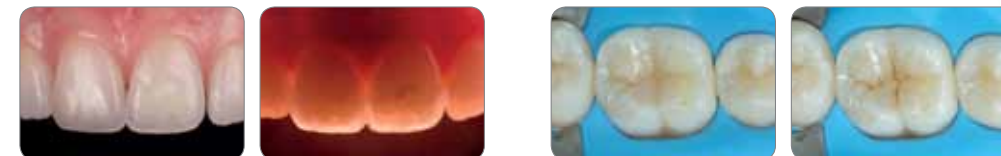

Dr. Javier Tapia Guadix (Spanyolország) klinikai esete